

IVALON

Surgical Products
by **fabco**®

股管纱布

CE 0459



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:

First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA

Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50369-00116 Rev. D


股管纱布

(K用于在髌关节置换手术过程中吸收液体)

使用说明


第 1 步. 塞入前准备工作

清洁并抽吸股管。将 10 cc 盐水注入股管。

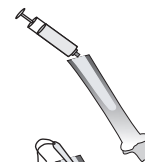


第 2 步. 塞入

从包装袋中取出纱布，将纱布末系线绳的一端塞入股管。纱布吸收盐水后开始在股管中膨胀。

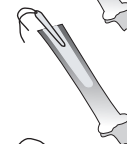


第 3 步. 膨胀

纱布迅速吸收盐水、开始膨胀并且填满股管。这将对股管壁造成轻微压力。

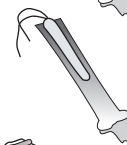

第 4 步. 取出

将纱布保持在适当部位至少一分钟。在涂敷骨水泥之前，通过轻轻拉动拉绳或者通过用镊子夹住纱布将其取出。

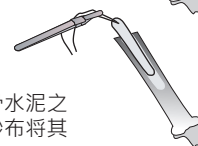

注意

- 首先润湿吸液芯。干吸液芯可能会刺激眼球结膜。
- 无菌器械。本产品仅限一次性使用；不得重复灭菌后使用。重复使用可造成微生物污染，导致患者以后健康恶化。FABCO 不对经过重复灭菌或重复使用的任何产品负责。
- 如果独立包装损坏或拆开，请勿使用。只要独立包装未拆开、损坏或超过有效期，本产品就是无菌产品。在操作的所有阶段，采用正确的无菌技术。
- 不要在临近外科手术的位置剪切纱布；如果不具备 X 光检测能力，碎屑可能会进入患者的伤口部位。如未能清除患者体内的纱布碎屑，则可能导致异物反应。

REF

再订购编号

LOT

批号

STERILE R

辐照灭菌



使用塞入物



不得重复使用



有效期

IVALON® 是 Medsorb Dominicana S.A. 的注册商标。

1391-50369-00116 Rev. D [CHS]