

IVALON

Surgical Products
by **fabco**®

Esponja para canal femoral



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:

First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50369-00116 Rev. D


Esponja para canal femoral

(usado para absorção de fluidos durante artroplastia de quadril)

INSTRUÇÕES DE USO


Passo 1. Antes da inserção

Limpe e succione o canal femoral. Introduza 10 cc de solução salina no canal femoral.

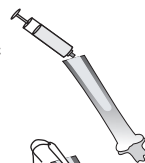


Passo 2. Inserção

Retire a esponja da embalagem e insira a ponta sem cordão no canal femoral. A solução salina começará a expandir a esponja dentro do canal femoral.

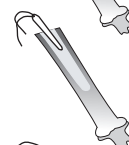

Passo 3. Expansão

A esponja absorverá rapidamente a solução salina e começará a se expandir e preencher o canal femoral. Uma leve pressão será exercida sobre a parede do canal.

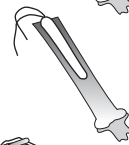

Passo 4. Retirada

Deixe a esponja no lugar por no mínimo um minuto. Retire a esponja antes da aplicação do cimento ósseo, puxando delicadamente o cordão, ou segurando a esponja com uma pinça.



CUIDADO

- As leis federais norte-americanas determinam que este dispositivo somente pode ser usado ou vendido por médicos, ou mediante solicitação médica.
- Estéril. Este produto é para Uso Único; não re-esterilize. A reutilização pode resultar em contaminação por micróbios e conseqüente deterioração da saúde do paciente. A FABCO não se responsabiliza por produtos que tenham sido re-esterilizados ou reutilizados.
- Não utilize caso a embalagem individual esteja danificada ou violada. Contudo que a embalagem individual não esteja aberta, danificada ou vencida, o produto permanece estéril. Utilize as técnicas apropriadas de assepsia em todas as fases do manuseio.
- Não corte esponjas próximas ao local do procedimento cirúrgico; fragmentos não detectáveis por raios-X podem entrar no local da incisão do paciente. A não remoção dos fragmentos de esponja do paciente pode resultar em uma reação a corpo estranho.

REF Número para novos pedidos	LOT Número de lote	STERILE R Esterilizado por irradiação	 Instruções de uso	 Não reutilize	 Validade
---	------------------------------	---	-----------------------	-------------------	--------------

IVALON® é uma marca registrada da Medsorb Dominicana S.A.

1391-50369-00116 Rev. D [PTB]