

IVALON

Surgical Products
by **fabco**[®]

Femoralkanalssvamp



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco[®]

Manufactured for:

First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON[®] is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50369-00116 Rev. D


Femoralkanalssvamp

(För användning efter endoskopisk sinuskirurgi)

BRUKSANVISNING


Steg 1. Före inläggning

Rengör och sug rent femoralkanal. Spruta in 10 cc koksaltlösning i femoralkanal.

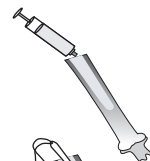


Steg 2. Inläggning

Ta ut svampen från paketet och för in änden utan tråd i femoralkanal. Koksaltlösningen startar expansionen av svampen i femoralkanal.

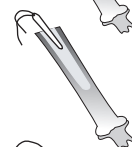


Steg 3. Expansion

Svampen absorberar snabbt koksaltlösningen och börjar expandera för att fylla ut femoralkanal. Ett lätt tryck utövas mot kanalväggen.

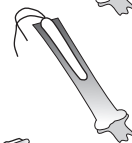

Steg 4. Avlägsnande

Låt svampen ligga på plats i minst en minut. Avlägsna svampen innan bencement appliceras genom att försiktigt dra i tråden eller genom att fatta tag i svampen med en peang.

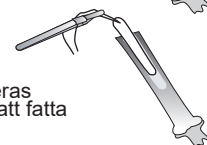

VIKTIGT

- Enligt federal lag (USA) får denna anordning endast säljas av läkare eller på läkares ordination.
- Steril. Den här produkten är endast avsedd för engångsbruk och den får inte omsteriliserats. Återanvändning kan resultera i mikrobiell kontamination och påföljande försämring av patientens hälsa. FABCO ansvarar inte för någon produkt som har omsteriliserats eller återanvänts.
- Använd ej om den individuella förpackningen har skadats eller öppnats. Produkten är steril så länge den individuella förpackningen inte har öppnats, skadats eller dess utgångsdatum är passerat. Använd korrekta aseptiska tekniker under alla hanteringsfaser.
- Klipp inte svampar i närheten av det kirurgiska ingreppet eftersom fragment som inte kan upptäckas via röntgen kan komma in i patientens sår. Underlåtenhet att avlägsna svampfragment från patienten kan resultera i en främmandekropsreaktion.

REF	LOT	STERILE R			
Beställningsnummer	Lotnummer	Steriliserad med strålning	Använd inläggning	Får ej återanvändas	Utgångsdatum

IVALON[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Medsorb Dominicana S.A.

1391-50369-00116 Rev. D [SVE]