

IVALON

Surgical Products
by **fabco**®

Dreno ocular



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:

First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medisorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medisorb Dominicana S.A.

1391-50117-00105 Rev. D

Dreno ocular

(para uso na remoção e coleta de fluidos em sítio cirúrgico oftalmológico)

INSTRUÇÕES DE USO

Passo 1. PREPARAÇÃO

Limpe e seque totalmente a área facial.

Passo 2. APLICAÇÃO DA BOLSA DE COLETA


Remova o filme da fita autoadesiva na bolsa de coleta.

(Obs.: deixe o cordão no lugar, dentro da bolsa de coleta.)

Prenda firmemente a bolsa à face lateral, a aproximadamente 6,5 mm da abertura da pálpebra. A bolsa de coleta deve ficar pendurada ao longo da face lateral, perpendicular à testa. Se for usado campo cirúrgico, prenda a bolsa ao campo.

Passo 3. POSICIONAMENTO DO CORDÃO

Puxe delicadamente o cordão da bolsa de coleta para expor o comprimento desejado. Umedeça o cordão com água estéril até amolecê-lo. Posicione o cordão no local desejado, certificando-se de que este não esteja dobrado ou obstruído pelos afastadores. Inicie o procedimento; irrigue normalmente.

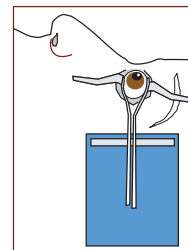

CUIDADO

- Umedeça primeiramente o cordão. O cordão ressecado pode irritar a conjuntiva.
- Estéril. Este produto é para Uso Único; não re-esterilize. A reutilização pode resultar em contaminação por micróbios e consequente deterioração da saúde do paciente. A FABCO não se responsabiliza por produtos que tenham sido re-esterilizados ou reutilizados.
- Não utilize caso a embalagem individual esteja danificada ou violada. Contanto que a embalagem individual não esteja aberta, danificada ou vencida, o produto permanece estéril. Utilize as técnicas apropriadas de assepsia em todas as fases do manuseio.
- Não corte esponjas próximas ao local do procedimento cirúrgico; fragmentos não detectáveis por raios-X podem entrar no local da incisão do paciente. A não remoção dos fragmentos de esponja do paciente pode resultar em uma reação a corpo estranho.

REF Número para novos pedidos	LOT Número de lote	STERILE R Esterilizado por irradiação	 Instruções de uso	 Não reutilize	 Validade
---	------------------------------	---	-----------------------	-------------------	--------------

IVALON® é uma marca registrada da Medisorb Dominicana S.A.

1391-50117-00105 Rev. D [PTB]