

IVALON

Surgical Products
by **fabco**[®]

Bloc de nettoyage PVA pour bistouris

CE 0459



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco[®]

Manufactured for:

First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON[®] is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50120-00115 Rev. D

Bloc de nettoyage PVA pour bistouris

MODE D'EMPLOI


Étape 1. AVANT L'UTILISATION

Hydrater une extrémité du bloc de nettoyage à l'aide de quelques gouttes d'eau stérile. (Il convient de noter que le bloc de nettoyage IVALON[®] absorbe rapidement les fluides ; par conséquent, quelques gouttes suffisent. Ne pas saturer le bloc.

Étape 2. NETTOYAGE D'UN BISTOURI

Essuyer délicatement la lame du bistouri sur l'extrémité humide du bloc de nettoyage. Répéter plusieurs fois cette procédure. Puis piquer la lame à plusieurs reprises dans l'extrémité sèche du bloc avant de la stériliser.

REMARQUE : pour un résultat optimal, utiliser l'extrémité humide du bloc de nettoyage pour nettoyer les instruments et l'extrémité sèche pour enlever les particules restées collées

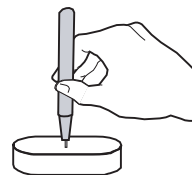

ATTENTION

- Stérile – Réserve à un usage unique. Toute réutilisation peut entraîner une contamination microbienne et la détérioration subséquente de l'état de santé du patient. FABCO n'est pas responsable des produits re-stérilisés et/ou réutilisés.
- Ne pas couper le bloc de nettoyage à proximité du site chirurgical et tenir les fragments éloignés. Des fragments d'éponge pourraient pénétrer dans la plaie du patient. Le non-retrait des fragments d'éponge du patient pourrait entraîner une réaction à corps étranger.
- L'utilisation du dispositif doit être effectuée par un médecin.
- Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé, ou présente une date d'expiration dépassée, pour prévenir tout risque de contamination et toute perte de stérilité. Utiliser les techniques d'asepsie appropriées dans toutes les phases de manipulation.
- Ne pas exercer de pression excessive sur la lame du bistouri au risque d'endommager celle-ci ou de se blesser.
- Les blocs de nettoyage usagés doivent être traités comme des déchets biologiques et éliminés en conformité avec la réglementation locale.

REF

Numéro de réapprovisionnement

LOT

Numéro de lot

STERILE R

Stérilisé par irradiation



Utiliser l'insert



Ne pas réutiliser



Date d'expiration

IVALON[®] est une marque déposée de Medsorb Dominicana S.A.

1391-50120-00115 Rev. D [FRA]