

IVALON

Surgical Products
by fabco®

Bloco de limpeza em PVA para bisturi

CE 0459



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:

First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50120-00115 Rev. D

Bloco de limpeza em PVA para bisturi

INSTRUÇÕES DE USO


Passo 1. ANTES DO USO

Hidrate uma das extremidades do bloco de limpeza com algumas gotas de água estéril. (Lembre-se de que o bloco de limpeza IVALON® absorve fluidos rapidamente - somente alguns gotas são suficientes. Não sature completamente o bloco.

Passo 2. PARA LIMPAR UM BISTURI

Passa delicadamente a lâmina do bisturi pela extremidade umedecida do bloco de limpeza. Repita esse procedimento diversas vezes. Depois, perfure a extremidade seca diversas vezes antes de esterilizar.

OBS.: Para otimizar o desempenho, utilize a extremidade umedecida do bloco de limpeza para lavar os instrumentos e a extremidade seca para remover partículas que estejam aderidas.

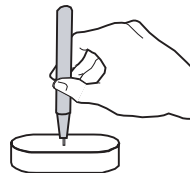

CUIDADO

- Estéril - para uso único. A reutilização pode resultar em contaminação por micróbios e consequente deterioração da saúde do paciente. A FABCO não se responsabiliza por produtos que tenham sido re-esterilizados e/ou reutilizados.
- Não corte os blocos de limpeza nem deixe fragmentos muito próximos ao procedimento cirúrgico. Fragmentos de esponja podem acabar entrando no local da incisão do paciente. A não remoção dos fragmentos de esponja do paciente pode resultar em uma reação a corpo estranho.
- O uso do dispositivo deve ser feito por um médico.
- Não utilize caso a embalagem esteja aberta, danificada ou vencida, para evitar risco de contaminação e perda de esterilidade. Utilize as técnicas apropriadas de assepsia em todas as fases do manuseio.
- Não coloque pressão demais sobre a lâmina do bisturi; o uso de força indevida pode resultar em danos ao bisturi ou riscos de segurança para o usuário.
- Blocos de limpeza usados devem ser considerados lixo biológico e descartados correspondentemente, de acordo com as normas locais.

REF

Número para novos pedidos

LOT

Número de lote

STERILE R

Esterilizado por irradiação



Instruções de uso



Não reutilize



Validade

IVALON® é uma marca registrada da Medsorb Dominicana S.A.

1391-50120-00115 Rev. D [PTB]