

# IVALON

Surgical Products  
by **fabco**®

## PVA knivreningsblock



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

**fabco**®

Manufactured for:  
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA  
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50120-00115 Rev. D

## PVA knivreningsblock

### BRUKSANVISNING


#### Steg 1. INNAN INSTRUMENTET ANVÄNDS

Hydrera den ena änden av rengöringsblocket med några droppar sterilt vatten. (Observera att IVALON® rengöringsblock absorberar vätska snabbt - endast några få droppar krävs. Vät inte blocket helt.

#### Steg 2. RENGÖRA EN KNIV

Stryk försiktigt knivbladet på den våta änden av rengöringsblocket. Upprepa denna procedur flera gånger. Stöt sedan den torra änden flera gånger före sterilisering.

Obs! För bästa prestanda, använd den våta änden av rengöringsblocket för att tvätta instrument och den torra änden för att avlägsna partiklar som fastnat på instrumenten

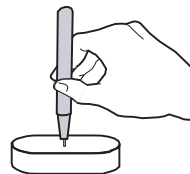

#### VIKTIGT

- Steril - Endast för engångsbruk. Återanvändning kan resultera i mikrobiell kontamination och påföljande försämring av patientens hälsa. FABCO ansvarar inte för någon produkt som har steriliserats om och/eller återanvänts.
- Klipp inte av knivblock och se till att inga fragment finns i närheten av det kirurgiska ingreppet. Svampfragment kan komma in i patientens sår. Underlåtenhet att avlägsna svampfragment från patienten kan resultera i en främmandekroppsreaktion.
- Instrumentet får endast användas av läkare.
- Får ej användas om paketet har öppnats, skadats eller om utgångsdatumet passerats. Detta för att förhindra risk för kontaminering och förlorad sterilitet. Använd korrekta aseptiska tekniker under alla hanteringsfaser.
- Utöva inte överdrivet tryck på knivbladet, eftersom detta kan resultera i att kniven skadas eller utgör en säkerhetsrisk för användaren.
- Använda knivreningsblock ska behandlas som bioavfall och kasseras i enlighet med lokala regler.

<b>REF</b>	<b>LOT</b>	<b>STERILE R</b>			
Beställnings- nummer	Lot- nummer	Steriliserad med strålning	Använd inläggning	Får ej återanvändas	Utgångsdatum

IVALON® är ett registrerat varumärke som tillhör Medsorb Dominicana S.A.

1391-50120-00115 Rev. D [SVE]